




**inogen connect**  
GETTING STARTED GUIDE



## Before You Start

### 1 Download App

From your smart device, go to the **APP STORE (APPLE)** or **Google Play (Android)**, search for the **Inogen Connect App** and download the software.

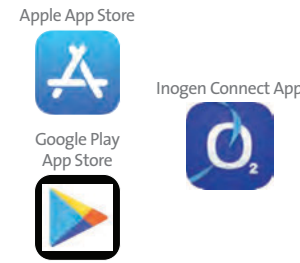

### 2 Plug In Your Inogen One G5

Connect the AC power supply cord to the concentrator. Plug the power supply AC cord into an electrical outlet. **Do not power on G5 concentrator.**



inogen connect

## Pairing

### 3 Pair Your Mobile Device With Your G5

- Go to **Settings** on your smart device and **turn on Bluetooth**.
- Slide the button to the right to turn on Bluetooth.
- Next, **turn on Bluetooth on your concentrator** by holding down the minus button until the Bluetooth symbol appears on the concentrator's display screen.



### 4 Open Inogen Connect App


The Inogen Connect Code can be found in your confirmation email or provided by your home care provider. Enter your Inogen Connect Code by:

- Manually entering.
- Use your smart device's camera to scan the QR code found on your invoice (must allow access to your camera through the app)

*Pairing is the term used to describe the process of wirelessly connecting two Bluetooth devices for the first time. "Pairing" allows the devices to recognize each other and creates a unique lasting connection between the specific devices.*



Example QR code

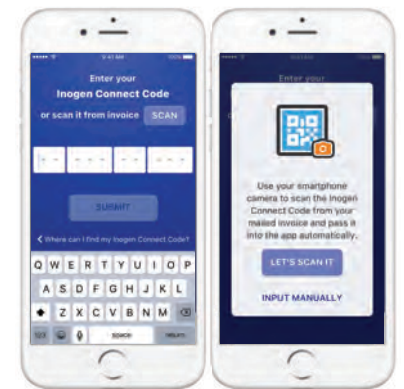


inogen connect

## Pairing


### 5 Search for Concentrator

Click on "Search for Concentrator" at the bottom of your screen.

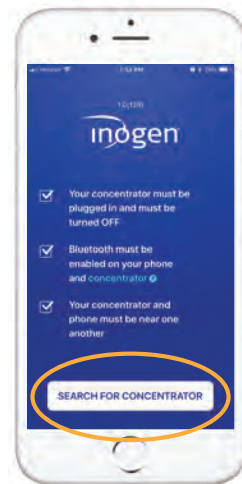

### 6 Select Serial #


When device is found, select your desired **Concentrator Serial Number** on your smart device.

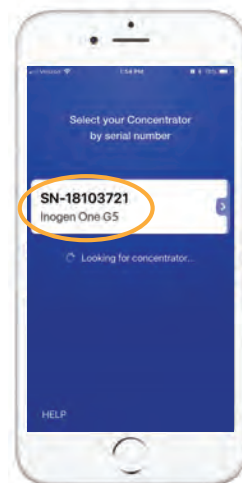

### 7 Terms & Conditions


Read the **Terms and Conditions** and if you choose to accept, select the "I Accept" button at the bottom of your screen.

There may be an additional consent statement for some locations. Read the **consent statement** and if you choose to accept, select the "I Accept" button at the bottom of your screen.

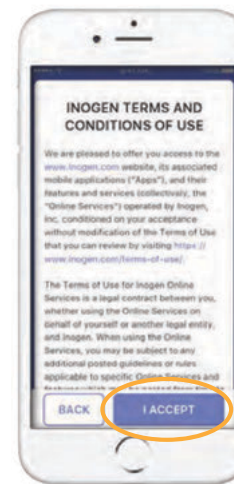

### 8 Press Bell Button


Press and hold the **bell button** on your G5 concentrator to finish pairing.

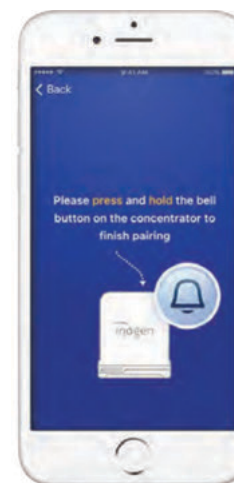

inogen connect

### 9 Wait to Pair

Please wait - your concentrator is pairing.

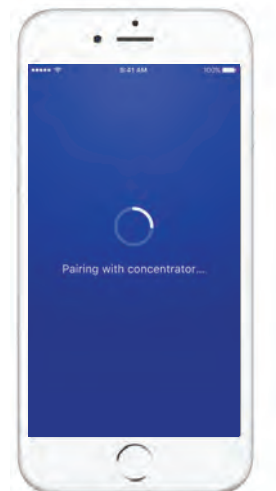

### 10 Pairing Complete

Your **Inogen One G5** is now paired with your smart device! Now you can turn on your Inogen One G5 and use it normally. The information displayed on your **Inogen Connect** screen will vary depending on your concentrator's current state.

For further information, see the Inogen Connect **FAQ** section at [www.inogen.com/app/](http://www.inogen.com/app/)



**THE PURPOSE OF THE INOGEN MOBILE APP IS TO PROVIDE ADDITIONAL CONVENIENCE TO THE PATIENT. HOWEVER, THE USER INTERFACE PANEL REMAINS THE PRIMARY SOURCE OF INFORMATION TO WHICH THE PATIENT SHOULD REFER.**

**CE 2797**  
**EC REP**  
Inogen, Inc.  
301 Coromar Drive,  
Goleta, CA 93117  
1-877-4-INOGEN (Toll Free)  
1-877-446-6436 (Toll Free)  
1-805-562-0515 (International)  
info@inogen.net  
www.inogen.net  
Europe Authorized Representative  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague  
The Netherlands

inogen connect

inogen connect




## Avant de commencer

### 1 Téléchargez l'application

Sur votre appareil intelligent, allez à l'App Store (Apple) ou à Google Play (Android), recherchez l'application Inogen Connect, puis téléchargez-la.

App Store d'Apple

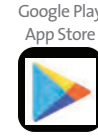

Application Inogen Connect



### 2 Branchez votre Inogen One G5

Connectez le cordon d'alimentation CA au concentrateur. Branchez le cordon d'alimentation CA dans une prise électrique.

N'allumez pas le concentrateur G5.



inogen connect

## Appariement


### 3 Appariez votre appareil mobile avec votre G5

- Allez à **Paramètres** sur votre appareil intelligent et **activez le Bluetooth**.
- Faites glisser le bouton vers la droite pour activer le Bluetooth.
- Ensuite, **activez le Bluetooth sur votre concentrateur** en maintenant le bouton moins enfoncé jusqu'à ce que le symbole du Bluetooth s'affiche sur l'écran du concentrateur.

Allez à Paramètres



Activez le Bluetooth sur l'appareil intelligent

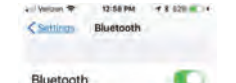

Activez le Bluetooth sur le G5



### 4 Ouvrez l'application Inogen Connect

Vous trouverez le Inogen Connect Code (Code Inogen Connect) dans votre courriel de confirmation ou votre fournisseur de soins à domicile vous l'a donné. Entrez votre Inogen Connect Code (Code Inogen Connect) en :

- l'entrant manuellement;
- utilisant l'appareil photo de votre appareil intelligent pour scanner le code QR qui se trouve sur votre facture (vous devez autoriser l'accès à votre appareil photo via l'application).

L'appariement est un terme utilisé pour décrire le processus de connexion sans fil de deux appareils Bluetooth pour la première fois. « L'appariement » autorise les appareils à se reconnaître l'un l'autre et crée une connexion durable unique entre les appareils spécifiques.



Exemple de code QR




inogen connect

## Appariement


### 5 Recherchez le concentrateur

Cliquez sur « Search for Concentrator » (Rechercher le concentrateur) en bas de votre écran.

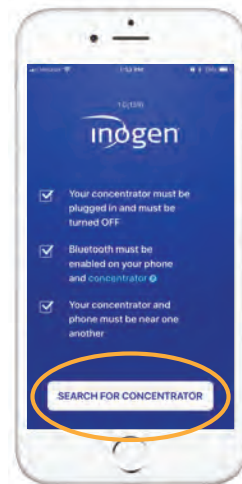

### 6 Sélectionnez le n° de série


Quand l'appareil est trouvé, sélectionnez votre Concentrator Serial Number (Numéro de série du concentrateur) souhaité sur votre appareil intelligent.

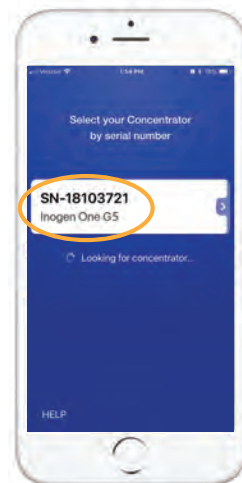

### 7 Conditions générales

Lisez les **Conditions générales** et, si vous choisissez de les accepter, sélectionnez le bouton « I Accept » (J'accepte) en bas de votre écran.

Il peut y avoir un consentement supplémentaire pour certaines régions. Lisez la **déclaration de consentement** et, si vous choisissez de l'accepter, sélectionnez le bouton « I Accept » (J'accepte) en bas de votre écran.

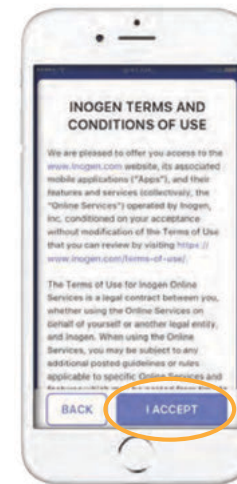

### 8 Appuyez sur le bouton de cloche

Appuyez sur le **bouton de cloche** et maintenez-le enfoncé sur votre concentrateur G5 pour terminer l'appariement.



inogen connect

### 9 Attendez l'appariement

Veillez patienter, votre concentrateur est en cours d'appariement.


### 10 Appariement terminé

Votre **Inogen One G5** est désormais apparié avec votre appareil intelligent! Maintenant, vous pouvez activer votre Inogen One G5 et l'utiliser normalement. Les renseignements affichés sur votre écran **Inogen Connect** varieront en fonction de l'état actuel de votre concentrateur.

Pour en savoir plus, consultez la section FAQ Inogen Connect sur le site [www.inogen.com/app/](http://www.inogen.com/app/)



L'APPLICATION MOBILE INOGEN A POUR OBJECTIF DE FOURNIR UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE AU PATIENT. CEPENDANT, LE PANNEAU D'INTERFACE UTILISATEUR RESTE LA SOURCE D'INFORMATION PRINCIPALE À LAQUELLE LE PATIENT DOIT SE RÉFÉRER.

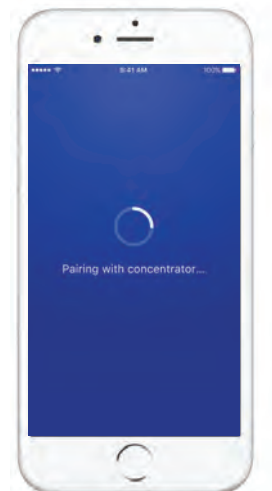

inogen connect

inogen connect

96-08833-00-02 B

Informations de position. Quand vous utilisez nos applications mobiles, nous recevons vos informations de position précises. Nous pouvons également recueillir la position précise de votre appareil quand l'application fonctionne en premier plan ou en arrière-plan/quand l'application est fermée. Nous utilisons vos informations de position pour surveiller l'emplacement de notre équipement, localiser l'équipement perdu ou volé, réaliser une étude de marché et localiser les représentants de service et les succursales à proximité. Nous déduisons également vos informations de position plus généralement (par exemple, votre adresse IP peut indiquer votre région géographique plus généralement). Nous pouvons divulguer les renseignements que nous recueillons sur vous (y compris vos informations de position) aux fournisseurs de soins à domicile qui participent à vos soins. L'application Inogen Connect est compatible avec les appareils suivants : iPhone 5 et versions ultérieures; iPad Air; iPad Air 2; iOS 9 et versions ultérieures; Samsung S5 et versions ultérieures; Nexus 5; Nexus 6; Nexus 9; Android 6 et versions ultérieures. Les modèles d'appareils compatibles sont sujets à modifications à tout moment sans préavis.

CE 2797

EC REP

Inogen, Inc.  
301 Coromar Drive,  
Goleta, CA 93177  
1-877-4-INOGEN (numéro vert)  
1-877-446-6436 (numéro vert)  
1-805-562-0515 (international)  
info@inogen.net  
www.inogen.com

Représentant agréé dans l'UE  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague  
The Netherlands